

CAV CELL INTRA PLUS



# Cav Cell Intra Plus



# Cav Cell Intra Plus



*Cav Cell Intra Plus, appareil de pointe conçu selon les dernières connaissances technologiques et largement testé dans le domaine de la médecine esthétique. Traitements ciblés non invasifs et mini-invasifs, qui permettent de maintenir ou de retrouver une apparence harmonieuse, en valorisant les formes et en mettant en valeur une beauté nette et naturelle, toujours en maintenant des niveaux élevés de confort et de sécurité, tant pour le praticien que pour le patient.*



## TECHNOLOGIES

Lipo Émulsification Ultrasonique Sous-cutanée,  
Hydrolipectasie Transdermique et Cavitation  
Transdermique en Médecine Esthétique

## TRAITEMENTS EXPLOITABLES



### ADIPOSITÉS LOCALISÉS

*Rouleaux de graisse, poignées d'amour, accumulations adipeuses sur les bras et les jambes, graisse abdominale...*



### IMPERFECTIONS DE LA CELLULITE

*Cellulite, peau d'orange..*



Traitement des accumulations adipeuses



Traitement de la cellulite



Traitement de la graisse abdominale



Traitement du ventre et des hanches

## LE DISPOSITIF

Cav Cell Intra Plus représente l'évolution du concept des « ultrasons », efficace en l'atténuation et réduction volumétrique des accumulations graisseuses localisées. L'appareil se caractérise par la possibilité d'intervenir au niveau sous-cutané par le biais d'un transducteur pour la soft-liposculpture. L'effet de cavitation sous-cutanée émulsifie la « graisse » qui, une fois rendue fluide, est naturellement métabolisée.

## ACCESSOIRES

N.01 câble d'alimentation

N.01 pédale

N.01 transducteur de 60 mm


N.01 transducteur de 80 mm

N.01 transducteur sous-cutané

N.03 canules L1 250 mm

N.03 canules L2 350 mm

N.01 protection stérile pour sonde

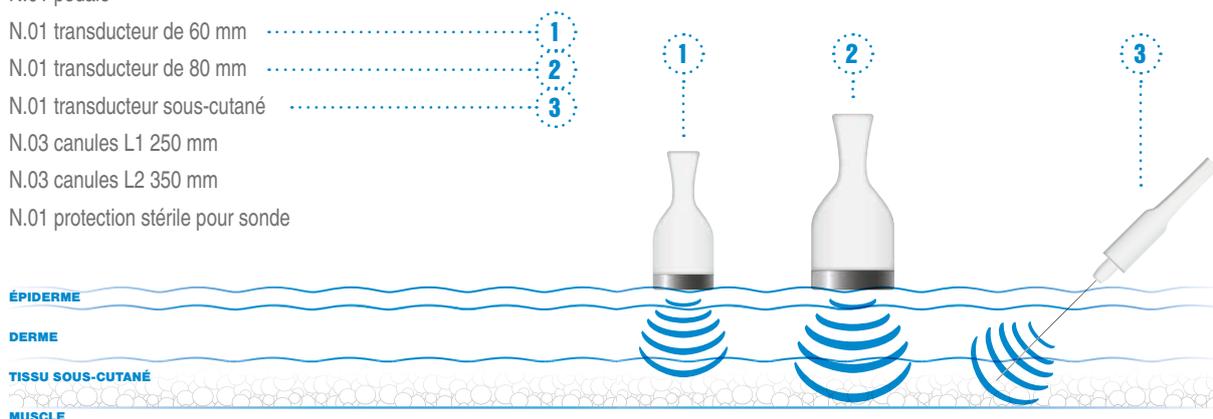

## PLUS



Dans tous les transducteurs est prévue la fonction ECO SCAN DETECTOR pour déterminer la puissance et fréquence optimales calculées sur la base du tissu cible. Le système relève et quantifie l'absorption sonore pour lequel, sur la base des paramètres relevés, module la puissance et à la fréquence plus basse correspond une thérapie plus profonde. Ce système permet d'agir en mode optimal aussi bien dans la structure fibreuse de la graisse qu'aux niveaux plus superficiels de la couche adipeuse, sans interférer avec le système vasculaire lymphatique.



Le patient peut reprendre les activités quotidiennes normales immédiatement.



Le dispositif est facilement transportable.



Tous les paramètres sont visualisés sur un écran tactile en couleur de 10.1".



Le logiciel est rédigé selon le concept Friendly Human-Machine Interface [FHMI] pour le rendre intuitif et facile à utiliser.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation 100÷240 V, 50÷60 Hz

Puissance Max Absorbée 450 W

Classe de sécurité électrique II BF

Dégré de protection IP IP40

Fréquence Ultrasons 28÷46 kHz configurable par logiciel

Densité de Puissance Ultrasons Max 3 W/cm<sup>2</sup>

Écran tactile en couleur de 10.1" avec PC intégré

Température de fonctionnement 0÷40 °C

Humidité de fonctionnement 30÷75 % sans condensation

Dimensions L 45 x H 96 x P 41 cm

Poids 10 kg

FABRIQUÉ EN ITALIE



---

Équipement certifié *MEDICAL DEVICE* conformément à la  
Directive 2007/47/CE corrective de la Directive 93/42/CE

---

*Top Quality Group se réserve de varier les données ci-dessus sans préavis et, toutefois,  
ces données ne sont pas valables à des fins contractuelles.*

[www.topqualitygroup.ch](http://www.topqualitygroup.ch)



Produit par **TOP QUALITY GROUP** Srl  
Via G. Sorel snc - Città di Castello (PG) Italie  
info@topqualitygroup.it  
[www.topqualitygroup.it](http://www.topqualitygroup.it)



Distribué par **TOP QUALITY GROUP** SA  
Via Cantonale 6, 6926 - Collina d'oro - Suisse  
T +41 0912 25 58 89  
[www.topqualitygroup.ch](http://www.topqualitygroup.ch)